




## Instrucciones para el paciente para muestra de heces Colección para el análisis de bacterias Usando un frasco de Cary Blair Vial

1. **Lávese las manos con agua y jabón** antes de iniciar la recolección de muestras de heces (o materia fecal).
2. Escriba el **nombre completo** del paciente, la fecha y hora de recolección de la muestra en la parte exterior del frasco de transporte. **Use letra de molde legible.**
3. Complete toda la información sobre la solicitud de prueba. **Use letra de molde legible. AVISO: El líquido rojo en el fondo del recipiente es venenoso. No beba ese líquido. Mantenga el recipiente fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. En caso de contacto del líquido con la piel o los ojos, enjuague con agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico.**
4. **Para recoger una muestra de heces**, antes de usar al baño, levante la tapa del inodoro y coloque un pedazo de papel de cera o envoltura de plástico sobre la taza del inodoro que esté asegurado con cinta adhesiva para evitar que la muestra caiga en la taza del inodoro.
5. Haga una depresión en la envoltura de plástico o papel de cera para facilitar la

recolección de la muestra. Baje la tapa del inodoro y proceda a la expulsión de heces (muestra de heces). No expulse la muestra en el inodoro. **No se debe orinar en la muestra.** No pase (o expulse) la muestra directamente en el frasco.

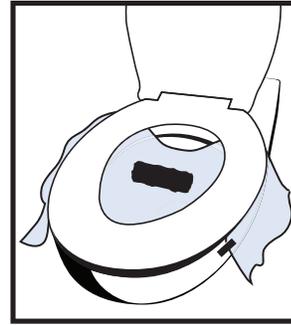

6. Abra el envase; use la cuchara incorporada a la tapa del frasco para transferir pequeñas muestras de las áreas que aparecen con sangre, viscosas o acuosas. Si la muestra es sólida, tome muestras de los dos extremos y del centro. Continúe agregando las muestras hasta que el nivel del líquido llegue a la línea de llenado de color rojo.
7. Mezcle el contenido del frasco con la cuchara. No es necesario retirar la cuchara antes de volver a tapar el frasco.
8. Vuelva a tapar el frasco y asegúrese que la tapa esté bien cerrada. Agite el envase hasta que el contenido se mezcle bien.
9. Asegúrese de que el nombre de la persona y la fecha de la recolección se encuentren en la parte exterior del recipiente de la muestra.
10. Coloque el recipiente en la bolsa de plástico y ciérrela.
11. Coloque la bolsa de plástico sellada en una bolsa de papel o de plástico.
12. Deseche el resto de las heces en el inodoro y deseche la envoltura de plástico sucia poniéndola en un papel o en una bolsa de

plástico. Coloque esta bolsa en una bolsa de plástico. Cierre la bolsa de plástico con un lazo de torcedura y póngala en la basura.

13. **Lávese bien las manos con agua y jabón.**
14. Coloque el frasco de la muestra (envuelta en papel o en una bolsa de plástico) dentro del refrigerador hasta que la entregue al Departamento de Salud.
15. Entregue la bolsa con el frasco de la muestra tan pronto como sea posible dentro de las 24 horas de su recolección, a menos que se indique lo contrario, al siguiente establecimiento:

Nombre del establecimiento

\_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_

Horario \_\_\_\_\_

Para cualquier pregunta, por favor llame a:

\_\_\_\_\_

Gracias por su tiempo y colaboración.

